



Fero

by Haelvoet



HAELVOET SA BELGIQUE
L. BEKAERTSTRAAT 8, 8770 INGELMUNSTER
T +32 (0) 51 48 66 95 F +32 (0) 51 48 73 19
INFO@HAELVOET.BE WWW.HAELVOET.BE

HAELVOET SA SUISSE
ROUTE DE LA PLAINE 45, 1580 AVENCHES
T +41 (0) 26 675 46 86 F +41 (0) 21 560 46 46
INFO@HAELVOET.CH WWW.HAELVOET.CH

HAELVOET S.A.R.L. FRANCE
PARC EURASANTÉ
310, AVENUE EUGÈNE AVINÉE, 59120 LOOS
T +33 (0) 3 21 70 63 71 F +33 (0) 3 21 76 62 67
INFO@HAELVOET.FR WWW.HAELVOET.FR

HAELVOET S.R.L. ROUMANIE
PARCUL INDUSTRIAL 1,455200 JIBOU, SALAJ
T +40 (0) 260 64 22 33 F +40 (0) 260 64 22 55
INFO@HAELVOET.RO WWW.HAELVOET.RO

WE CREATE FURNITURE TO HEAL, TO CARE & TO MEET






Haelvoet sa
Edition 2016

Haelvoet se réserve le droit d'apporter des modifications.
Des petites différences de couleurs sont possibles.

Fero en bois

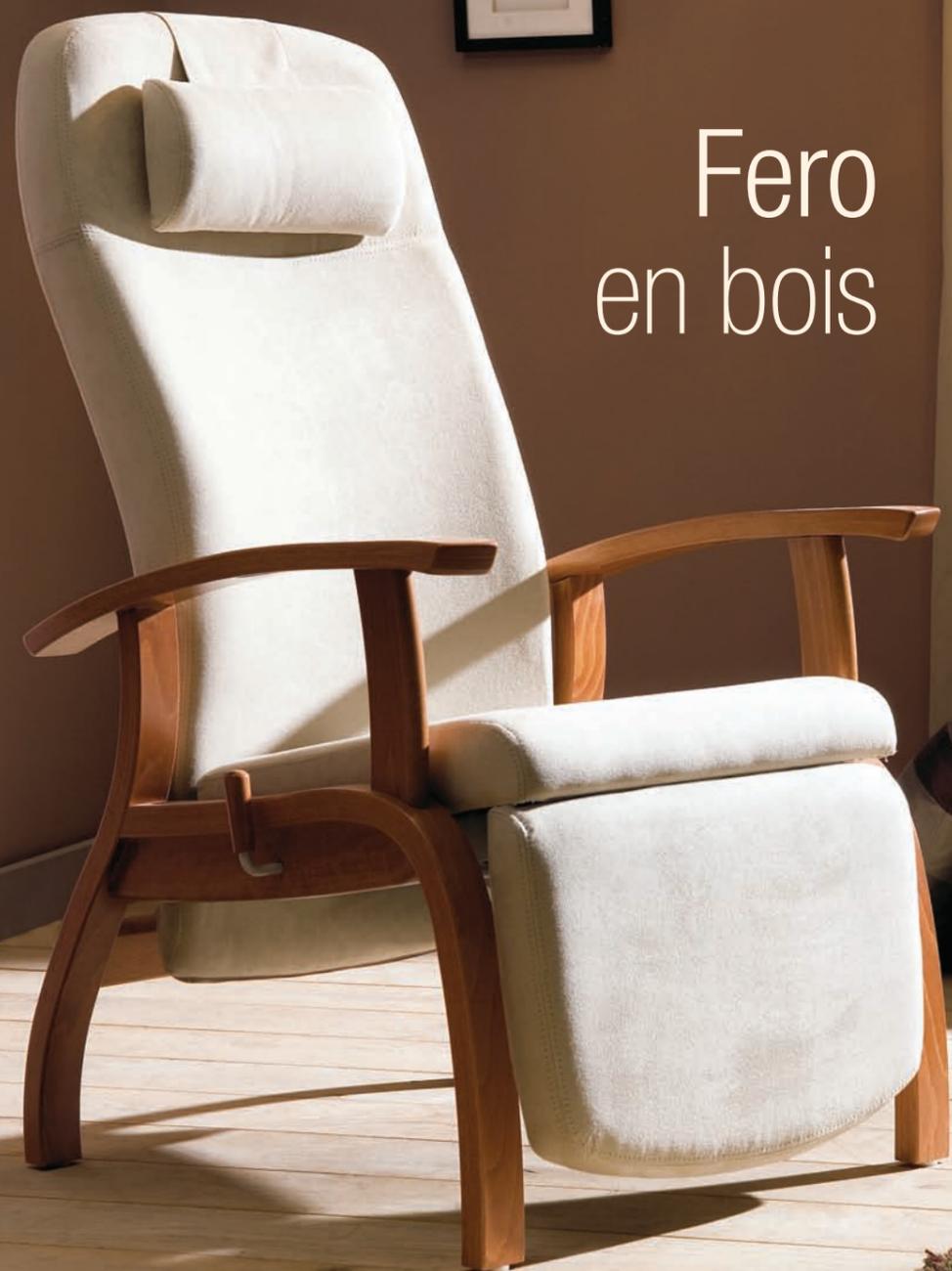

Fero fauteuil relax



Fauteuil relax avec roues
et accoudoirs abaissables

04972 Ergo-line
07578 Classic



Fauteuil relax avec roues

04208 Ergo-line
07579 Classic



Fauteuil relax

03877 Ergo-line
07580 Classic

Fero fauteuil de repos



Fauteuil de repos inclinable

05562



Fauteuil de repos

04738

Fero e-move

Le fauteuil Fero e-move est équipé d'un dossier et d'un repose-jambes réglables électriquement. L'inclinaison se fait à l'aide d'une télécommande facile à utiliser.



E-move

14255



E-move avec roues

13605



Grâce à nos processus de production modernes et écologiques, une utilisation maximale de matériaux recyclables et notre certificat PEFC, opter pour Haelvoet, c'est opter pour un produit correct.

Les fauteuils Fero représentés contiennent des options.

Fero en métal



Fero fauteuil relax



Fauteuil relax avec roues
et accoudoirs abaissables

05600 Ergo-line



Fauteuil relax avec roues

04749 Ergo-line



Fauteuil relax

04219 Ergo-line
07471 Ergo-line avec
accoudoirs abaissables

Fero fauteuil de repos



Fauteuil de repos inclinable
avec roues
et accoudoirs abaissables

06038



Fauteuil de repos inclinable
sans roues
avec accoudoirs abaissables

06036



Fauteuil de repos

05563 Inclinable
07022 Non inclinable

Fero à hauteur variable



Fero à hauteur variable

13590

Fero Obesitas



Fero obesitas

08018

Les fauteuils Ferro représentés contiennent des options.

Fero à hauteur variable

Réglable en hauteur

Facilement accessible des deux côtés grâce à sa pompe hydraulique, le fauteuil est réglable en hauteur de 53 jusqu'à 83 cm (hauteur d'assise).

Freinage centralisé

Vous avez l'assurance d'une parfaite maniabilité grâce à ses grandes roues (Ø 125 mm) dont deux roues à blocage directionnel et à son système de freinage centralisé particulièrement astucieux. La pédale de frein double est accessible à l'avant et à l'arrière du fauteuil.

Mécanisme relax

Le mécanisme relax appelé "Ergo-line" réduit les points de pression sur le corps et entraîne une bonne circulation sanguine (voir p. 14). La position relax est activée par un levier qui se trouve à chaque côté du fauteuil relax. En activant le levier vers l'arrière, le mécanisme d'inclinaison est activé vers la position voulue.

Fonction releveur (*)

Optionnellement le fauteuil peut être équipé d'une fonction releveur. La fonction releveur est activée par un levier qui se trouve à chaque côté du fauteuil relax. En activant le levier vers l'avant, la fonction releveur est activée. L'arrière de l'assise du fauteuil est soulevé et le patient est aidé pour se lever hors du fauteuil.

* option Fero à hauteur variable



Fero Obesitas

Le fauteuil Fero Obesitas est un fauteuil extrêmement confortable, spécialement conçu pour les patients bariatriques. Le dossier inclinable électriquement et le revêtement de haute qualité offrent un grand confort pour une assise de longue durée. En outre, les accoudoirs abaissables facilitent le transfert. Les roues design Integral avec mécanisme de freinage central rendent le déplacement du patient plus aisé. De plus, le fauteuil est si bien développé qu'il ne se distingue pas d'un fauteuil de soins moderne.






001 Repose-pieds amovible (*)

002 Repose-jambes amovible (*)

003 Flexible pour commande manuelle (*)



* option Fero Obesitas

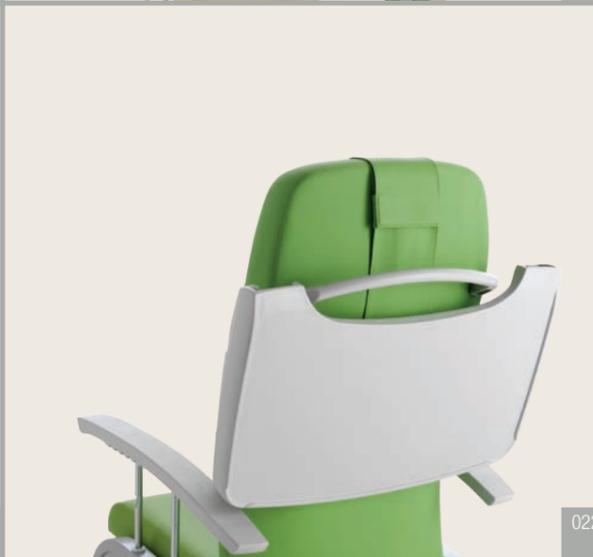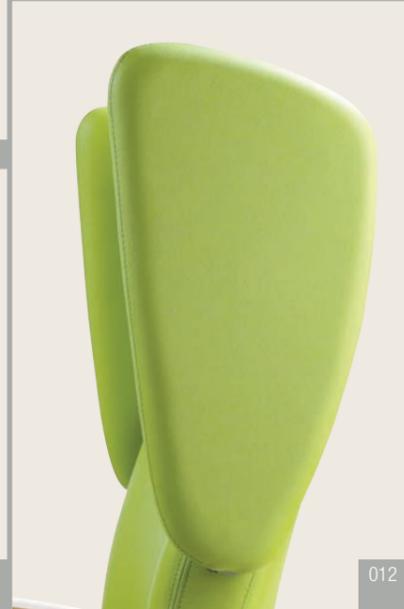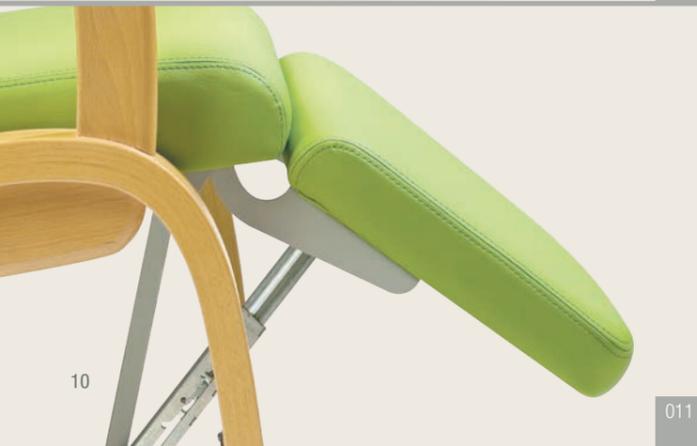

Options Fero by Haelvoet		Bois							E-move		Métal								Obesitas	Hauteur variable	
		04972	07578	04208	07579	03877	07580	05562	04738	14255	13605	05600	07471	04749	04219	06038	06036	05563	07022	08018	13590
001	Fixation tablette repas	●	●	○	○	○	○	○	○	○	○	●	●	●	●	●	●	●	●	-	●
002	Tablette repas Elice (en combinaison avec la fixation tablette repas)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	-	○
003	Selle d'abduction (en combinaison avec la tablette repas Elice)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	-	○
004	Roues design ø 100 mm freinage séparé	-	-	●	●	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
005	Roues Integral S ø 125 mm freinage central	●	●	-	-	-	-	-	-	-	●	-	●	-	●	-	-	-	-	●	●
006	Pédale de frein double	○	○	-	-	-	-	-	-	-	○	-	○	-	○	-	-	-	-	○	●
007	Frein individuel à l'avant	-	-	-	-	-	-	-	-	-	○	-	○	-	-	-	-	-	-	-	-
008	Repose-pieds	●	●	○	○	-	-	-	-	-	●	-	●	-	●	-	-	-	-	-	●
009	Roulettes intégrées à l'arrière	-	-	-	-	○	○	○	○	○	-	●	-	●	-	●	●	●	-	-	-
010	Verrouillage du levier de commande	○	-	○	-	○	-	-	-	-	○	○	○	○	-	-	-	-	-	-	○
011	Repose-jambes à réglage manuel	○	-	○	-	○	-	-	-	○	○	○	○	○	-	-	-	-	-	-	-
012	Appui-tête latéral	○	○	○	○	○	○	○	-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	-	-	○
013a	Coussin tête-nuque réglable et amovible	●	●	●	●	●	●	○	○	●	●	●	●	●	○	○	○	○	○	○	●
013b	Têtière amovible	○	○	○	○	○	○	-	-	○	○	○	○	○	-	-	-	-	-	-	○
014a	Douille pour porte-sérum	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	-	○	●
014b	Porte-sérum	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	-	○	○
015	Coussin avec mousse viscoélastique	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	-	○
016	Réducteur anatomique	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	-	○
017	Crochet pour lanières de fixation	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	-	○
018	Accoudoirs avec revêtements amovibles	○	○	○	○	○	○	○	-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
019	Accoudoirs semi-revêtus	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
020	Accoudoirs larges et pivotants	○	○	-	-	-	-	-	-	-	-	○	○	-	-	○	○	-	-	○	○
021	Crochets pour accessoires	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
022	Crochet pour tablette repas	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	-	○
023	Côtés fermés	-	-	○	○	○	○	○	○	○	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
024	Poignée en matière synthétique	●	●	●	●	-	-	-	-	-	●	●	-	●	-	●	-	-	-	●	●

● : Standard ○ : Options - : Pas possible

Le fauteuil Fero relax

un bienfait pour le patient

Ergo-line versus Classic

Les deux fauteuils sont équipés d'un mécanisme spécialement développé pour le secteur des soins qui permet à l'utilisateur de s'incliner jusqu'à la position « Zero-Gravity »*.

- Le fauteuil Fero relax Ergo-line dispose des deux côtés d'une manette avec fonction identique. La manette est facilement manipulable et ne peut être déplacée que dans une direction. La manette dispose d'une position « on » et d'une position « off » et maintient la position choisie. Dans la position « on », le résident dispose de ses deux mains pour se positionner. Contrairement au fauteuil Fero relax Classic, l'assise, le dossier et le repose-jambes du fauteuil Fero Ergo-line s'inclinent simultanément et en continue.
- Le fauteuil Fero relax Classic peut se régler simplement d'une légère poussée corporelle, et cela, sans manipulation de la manette. Le mécanisme relax relève d'abord les jambes, ce qui permet ensuite à l'ensemble du fauteuil de continuer à s'incliner. Dans ces 2 versions la manipulation du fauteuil nécessite très peu d'efforts.

Place au Confort

Le fauteuil Fero relax est parfaitement adapté aux besoins du patient. En effet, le confort d'assise est d'une importance primordiale pour le patient. Dans le fauteuil Fero relax Ergo-line et Classic, le patient bénéficie d'un soutien exceptionnel. Le corps peut se trouver dans différentes positions, en tenant compte de la répartition de la pression et de la position des parties du corps par rapport aux autres. Les positions prises par le corps causent ainsi une diminution de résistance abdominale et une augmentation du confort pour le patient. Grâce au mécanisme ingénieux, les jambes continuent à être soutenues lors de changements de position. Le soutien complet des jambes fait en sorte que la pression au niveau des genoux diminue dès que le mécanisme du fauteuil est activé. Dans la position « Zero-Gravity »*, la pression au niveau des genoux est rendue négligeable. Des coussins pour soutenir les genoux sont ainsi rendus superflus. Le coussin nuque réglable assure un soutien optimal pour la nuque et la tête.

Circulation sanguine et respiration naturelles

Surtout les utilisateurs plus âgés souffrent de troubles respiratoires et de troubles de la circulation, comme l'artériosclérose, l'athéromathose, les veines ulcées, le pied diabétique, la décompensation cardiaque, et des problèmes pulmonaires (emphysème, réduction de la capacité pulmonaire, etc...). Par le réglage facile du fauteuil, la position du corps se modifie selon les besoins.

Chaque fois qu'un changement de position s'effectue, le rapport perfusion/ventilation des poumons en subit des effets. Les alvéoles des poumons sont ainsi stimulées, générant plus de surfactants pulmonaires. Par conséquent, les alvéoles restent extensibles et l'oxygénation du sang s'en trouve nettement améliorée. Les changements de position, la position « Zero-Gravity »* en particulier, entraînent une circulation sanguine optimale.

Vu que les jambes et le cœur se retrouvent presque au même niveau dans la position « Zero-Gravity »*, la pression veineuse dans les membres inférieures diminue de façon naturelle. Ainsi, les jambes sont moins fatiguées et le processus de guérison d'escarres est accéléré.

Lutte anti-escarre

Le réglage synchrone de l'assise, du dossier et du repose-jambes annule les forces de frottement. Différentes densités de mousse garantissent que la pression soit répartie le plus uniformément possible sur les points sensibles du corps. En combinaison avec une inclinaison prononcée de l'assise dans la position « Zero-Gravity »*, le corps est soutenu de façon optimale et le risque d'escarres est fortement réduit.

Aide au lever

Le lever est très agréable pour le patient grâce à la hauteur adaptée de l'assise et grâce au repose-jambes qui peut se replier suffisamment loin en dessous de l'assise. Les pieds peuvent être placés suffisamment en arrière pour que le lever se déroule de façon optimale. Les accoudoirs ergonomiques offrent le soutien nécessaire.

Fonctionnalité

Le fauteuil relax est fonctionnel et modulable à souhait ainsi de nombreux accessoires viennent le compléter tels que le réducteur anatomique, le verrouillage de l'inclinaison, le porte-sérum, la têtière amovible, les accoudoirs revêtus, le coussin d'assise avec mousse viscoélastique, le repose-jambes réglable indépendamment, ... Les deux fauteuils peuvent être équipés d'une tablette repas en matière synthétique, légère, robuste, anti-choc et facile à monter.



* Position « Zero-Gravity » : Cette position assise/allongée est inspirée des données de la NASA, il s'agit d'une position du corps neutre, qui transforme la force musculaire en un équilibre biomédical.