

DuoSafe Seitensicherung

Die DuoSafe Seitensicherung ermöglicht einen einstellbaren Fallschutz des Patienten. Dank der integrierten Bedieneinheiten können sowohl der Patient als auch das Pflegepersonal die Bettfunktionen betätigen.

Aufbau

- Die Seitensicherung ist aus 4 Kunststoffteilen hergestellt, die auf Schwenkarme montiert sind.
- Die Schwenkarme sind aus Metall hergestellt und garantieren eine optimale Steifigkeit.
- Die Seitensicherung ist mit Lagern ausgestattet, so dass eine geräusch- und wartungsarme Verwendung garantiert ist.
- Die Seitenteile werden an der Rückenlehne und Liegefläche befestigt, so dass der Patient bestmöglich geschützt ist, selbst wenn die Teile der Liegefläche geneigt werden.
- Alle Ecken und Kanten sind abgerundet.
- Ergonomische Handgriffe garantieren einen angenehmen Griff.
- Jedes Seitenteil kann separat gehoben werden und verriegelt sich selbst in der höchsten Position.
- Ein Dämpfer sorgt dafür, dass die Seitenteile langsam senken.
- In der niedrigsten Position hindert die Seitensicherung den Patienten nicht, wenn er aus dem Bett steigen will, oder wenn das Bett gemacht werden soll. Auch während des Patiententransportes oder der Verwendung eines Patientenlifters stellt sie kein Hindernis dar.
- Der geringe Abstand zwischen den Seitenteilen beugt die Einklemmgefahr vor. Die Seitensicherung entspricht also den strengsten Anforderungen der Sicherheitsnormen tadellos.
- Die Gesamthöhe ist ca. 42 cm (gemessen von der Liegefläche).
- Der Abstand zwischen der Oberseite der Seitensicherung (in niedrigster Position) und der Liegefläche ist höchstens 7,5 cm.
- Die Seitensicherung ist am beiden Bettseiten mit einem eingebauten Zubehörhaken ausgestattet.
- Die Seitensicherung kann als Aufstehhilfe verwendet werden.
- Dank der Lücke (32 cm) zwischen dem Fußteil und dem Seitenteil am Fußende ist das Bremspedal immer erreichbar, auch wenn die Seitensicherung sich in ihrer niedrigsten Position befindet.
- Die DuoSafe Seitenteile sind mit zwei integrierten Neigungsanzeigen ausgestattet, die den Neigungswinkel der Rückenlehne und der Liegefläche zeigen.


Eingebaute Bedieneinheit (*)

- **Keypad - nursing (*)**: Die Pflegebedieneinheiten befinden sich auf der Außenseite der DuoSafe Seitensicherung und sind mit allen Funktionen ausgestattet, um den Patienten in die erwünschte Sitz-, Liege- oder Lese-Position zu stellen. Mit zusätzlichen Funktionen kann das Pflegepersonal auch Funktionen selektiv sperren, und die sichere Bettposition und den Batteriestand im Nu prüfen.
- **Keypad - Patient (*)**: Die Patientenbedieneinheit mit integrierter Hintergrundbeleuchtung ermöglicht es, die Bettfunktionen mittels eines benutzerfreundlichen Berührungsschirms zu betätigen.



Zierstreifenfarben


Bitten Sie uns um unser reichhaltiges Angebot.
Musterkarte + Muster auf Anfrage erhältlich.

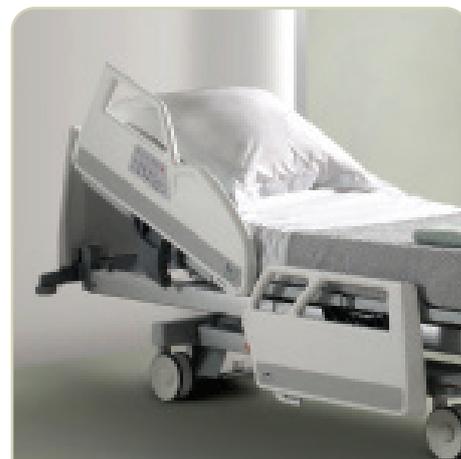

Maße

DuoSafe Seitensicherung

- Seitenteil 1: 94 x 42 cm
- Seitenteil 2: 71 x 42 cm
- Maximale Höhe der Matratze: 19 cm

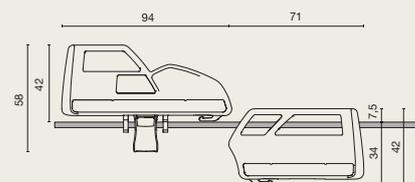

Materialien und Gestaltung

- Kunststoff.
- Beständig gegen Desinfektionsmittel und die üblichen Reinigungsprodukte.

Die DuoSafe Seitensicherung entspricht den Anforderungen der Sicherheitsnorm **IEC 60601-2-52**.

Weitere Informationen über die **Materialien, Konstruktion** und **Wartung**: Bitten Sie uns um unsere Materialdateien.

Optionen

- Eingebaute Bedieneinheiten zur Betätigung der Bettfunktionen.

